

TUYAU À AIR CHAUD

Pour une utilisation en phase post-opératoire

Taille (L×L) 250×20cm

N° Art. 2VT006



FILET À LINGE – GRAND

Filet à linge pour alèse chauffante VET1.5

Taille (L×L) 34×105 cm

Poids environ 160 g

N° Art. 4WN015



FILET À LINGE – PETIT

Filet à linge pour alèse chauffante VET 2

Taille (L×L) 40×60 cm

Poids environ 115 g

N° Art. 4WN020



TUYAU DE RACORDEMENT

Connecte la couverture chauffante avec une base chauffante

Taille (L×L) 80×8cm

Poids 400 g

N° Art. 2VT011



HOUSSES DE PROTECTION POUR COUSSINS CHAUFFANTS

Protégez votre matelas chauffant des salissures

Taille (L×L) 75×95cm

Poids environ 120 g

N° Art. 2VT009



FIXATION POUR CABLES

Maintient fermement le tuyau de votre appareil de chauffage dans la connexion du tuyau du matelas chauffant

Taille (L×L) 26/35×2,5cm

N° Art. 4KV0005



VOS AVANTAGES EN UN COUP D'ŒIL

- + *Gestion efficace de la chaleur*
- + *Chaleur par convection à tous les points de contact*
- + *Réduction de la pression de contact*
- + *Lavable et réutilisable*
- + *Appareil à air chaud avec deux tuyaux de haute qualité*
- + *Puissant avec peu de bruit de fonctionnement*

38.5 °C


MOECK VETERINARY



MOECK & MOECK

MOECK & MOECK GmbH
Belinda Kock

Tel. +33(0)6 25 55 63 71
belinda.kock@moeck.fr

MOECKWARMINGSYSTEM.DE
MOECKUNDMOECKSHOP.DE

LA CHALEUR EST NÔTRE COMPÉTENCE





MOECK VETERINARY

UN SYSTÈME DE GESTION DE LA TEMPÉRATURE MODERNE ET COMPLET

Dans les situations cliniques, les animaux dépendent d'un apport de chaleur externe, car l'anesthésie pert leur thermorégulation naturelle. La température centrale du corps doit être maintenue dans la plage normothermique.

Grâce aux précieuses connaissances issues de la médecine humaine, le MOECK WARMING SYSTEM®, composé d'un appareil à air chaud et de supports chauffants réutilisables, a été développé et adapté spécifiquement pour la médecine vétérinaire.

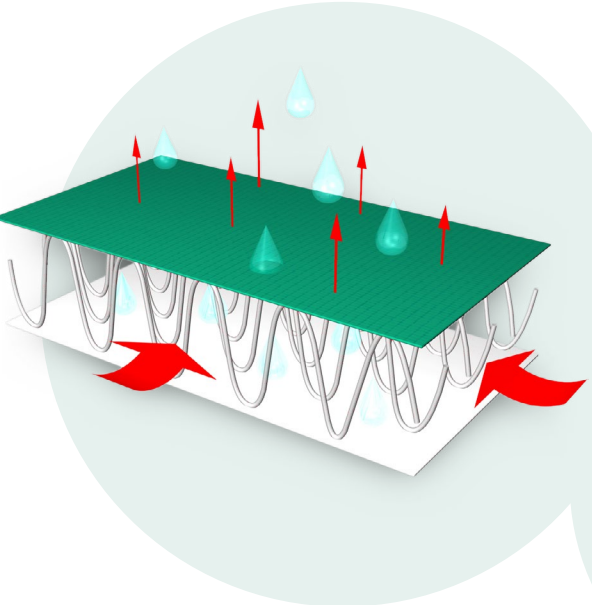


LE PRINCIPE

Basé sur l'utilisation de la transmission d'air par convection, le système de réchauffement MOECK WARMING SYSTEM® se compose d'une unité de chauffage par air chaud et de différents modèles de textiles réutilisables. L'air chauffé par l'appareil est dirigé à l'intérieur du produit textile connecté par un ou deux tuyaux flexibles. Grâce aux matériaux soigneusement sélectionnés des produits textiles, l'air fourni se répartit uniformément sous le patient, de manière à le réchauffer efficacement en fonction du réglage souhaité sur l'appareil.

LE MOECK WARMING SYSTEM® EN DÉTAIL

Les produits textiles du MOECK WARMING SYSTEM® sont composés de trois textiles techniques soigneusement sélectionnés, chacun remplissant des fonctions spécifiques et formant ensemble un système parfaitement coordonné. Ainsi, la face verte, tournée vers le patient, est composée d'un tissu à filaments finement poreux. Cette perméabilité à l'air assure un flux d'air uniforme (pas d'effet de jet, donc faible en germes), ce qui permet d'atteindre une température idéale pour le patient. De plus, les fibres de carbone intégrées empêchent toute charge statique.

La face blanche, détournée du patient, est également dotée d'un revêtement en polyuréthane qui sert de barrière à l'air et aux liquides. Ainsi, la chaleur fournie est directement dirigée vers le patient.

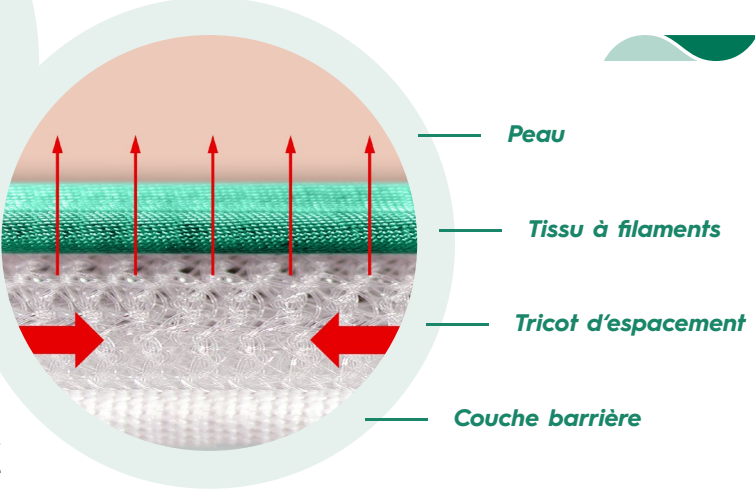

De plus, les sous-couches thermiques entre la face verte et la face blanche contiennent plusieurs couches de tricot d'espacement. Cette couche intermédiaire s'adapte élastiquement à la forme du corps et au poids du patient, offrant un soulagement de la pression et un meilleur confort de couchage. D'autre part, en raison de sa structure tridimensionnelle et de sa structure grossière, le tricot d'espacement présente une fonction de conduction de l'humidité hautement efficace, contribuant à l'évacuation de l'humidité vers le bas.

MATELAS CHAUFFANT VET1.5

Pour les chiens et les chats
Taille (L×L) 100×55cm
Poids environ 830g
N° Art. 2VT015



MATELAS CHAUFFANT VET2

Pour les petits chiens et les chats
Taille (L×L) 55×65cm
Poids environ 400g
N° Art. 2VT002




MATELAS CHAUFFANT VET2.5

Pour lapins, cochons d'Inde et hamsters, avec une rangée de boutons permettant de bien maintenir en place les rabats latéraux
Taille (L×L) 57×72 cm
Poids environ 280 g
N° Art. 2VT010



PLAFOND CHAUFFANT POUR VET1.5

Couverture chauffante à découpe variable pour la tête et le cou, particulièrement adaptée pour interventions dentaires
Taille (L×L) 130×90cm
Poids environ 360 g
N° Art. 2VT010

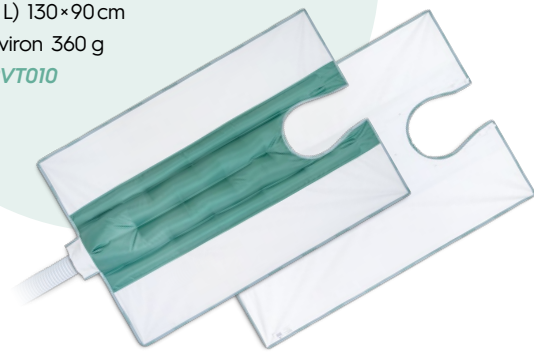

APPAREIL À AIR CHAUD DEUX TUYAUX – TWINWARM BB

Réglage de la température précis entre 28°C et 43°C
5 niveaux de ventilation individuellement sélectionnables
Taille (L×L×H) 46×37×46cm
Poids environ 12,6kg
N° Art. 12BB06(FR)



APPAREIL À AIR CHAUD – IOB

Réglage de la température ambiante, 32°C, 38°C et 43°C
Deux niveaux de ventilations
Taille (L×L×H) 22×22×28cm
Poids environ 5,4 kg
N° Art. 12IOB01DE

